

NOME TÉCNICO: VESTIMENTA HOSPITALAR
NOME COMERCIAL: AVENTAL DESCARTÁVEL – GLOMED
NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80273450008
CLASSIFICAÇÃO ANVISA: I – BAIXO RISCO



DETENTOR DO REGISTRO
OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.
CNPJ: 03.033.589/0001-12
Rua Ricardo Georg, 1115 – Itoupava Central
Blumenau – SC – Brasil
CEP 89069-101
SAC 0800-645-2480 / sac@olimed.com.br

RESPONSÁVEL TÉCNICA :
SIMARA COLOMBI BUSCH - COREN/SC 273.138

FABRICANTE :
GRAND SHANGHAI INDUSTRIES CO., LTD
Suite 202, No. 788 Xiupu Road, Kangqiao, New Pu Dong District, Shanghai, P:R. China.

DESCRIÇÃO TÉCNICA:

O avental descartável – GLOMED é confeccionado em tecido não tecido (TNT) 100% polipropileno, proporcionando leveza e conforto durante o uso. Possui elástico nos punhos e tiras para amarração na cintura e no pescoço, permitindo ajuste adequado. Disponível na cor branca. Não impermeável. O produto é livre de látex.

MODELOS DISPONÍVEIS:

CÓDIGO INTERNO	MODELO	GRAMATURA	TAMANHO		TIPO DE ACABAMENTO
			COMPRIMENTO	LARGURA	
92002	PREMIUM	20g	1,40mm	1,40mm	COSTURADO NAS AMARRAÇÕES
114181	PREMIUM	30g	1,40mm	1,40mm	COSTURADO NAS AMARRAÇÕES
115170	PREMIUM	40g	1,40 mm	1,40 mm	COSTURADO NAS AMARRAÇÕES
92003	PADRÃO	20g	1,40mm	1,40mm	SEM COSTURA
114182	PADRÃO	30g	1,40mm	1,40mm	SEM COSTURA
115171	PADRÃO	40g	1,40mm	1,40mm	SEM COSTURA


DIMENSÕES DAS CAIXAS:

PRODUTO	MODELO	PESO	LARG	ALT	COMP	COD. DE BARRAS COMERCIAL PCT C/ 10 UND	COD. DE BARRAS TRANSPORTE	
AVENTAL 20G	PREMIUM	13,10	0,53	0,61	0,27	0606529141134	20606529141138	30 PCT C/ 10 UND
AVENTAL 30G	PREMIUM	12,60	0,46	0,63	0,28	0602883920798	20602883920792	20 PCT C/ 10 UND
AVENTAL 40G	PREMIUM	8,70	0,32	0,52	0,31	0618341483378	20618341483372	10 PCT C/ 10 UND
AVENTAL 20G	PADRÃO	16,20	0,320	0,510	0,580	0070341196236	20070341196230	30 PCT C/ 10 UND
AVENTAL 30G	PADRÃO	16,80	0,320	0,510	0,510	0070341196250	20070341196254	20 PCT C/ 10 UND
AVENTAL 40G	PADRÃO	10,70	0,32	0,27	0,59	0070341196274	20070341196278	10 PCT C/ 10 UND

IMAGEM GRÁFICA:



FRENTE

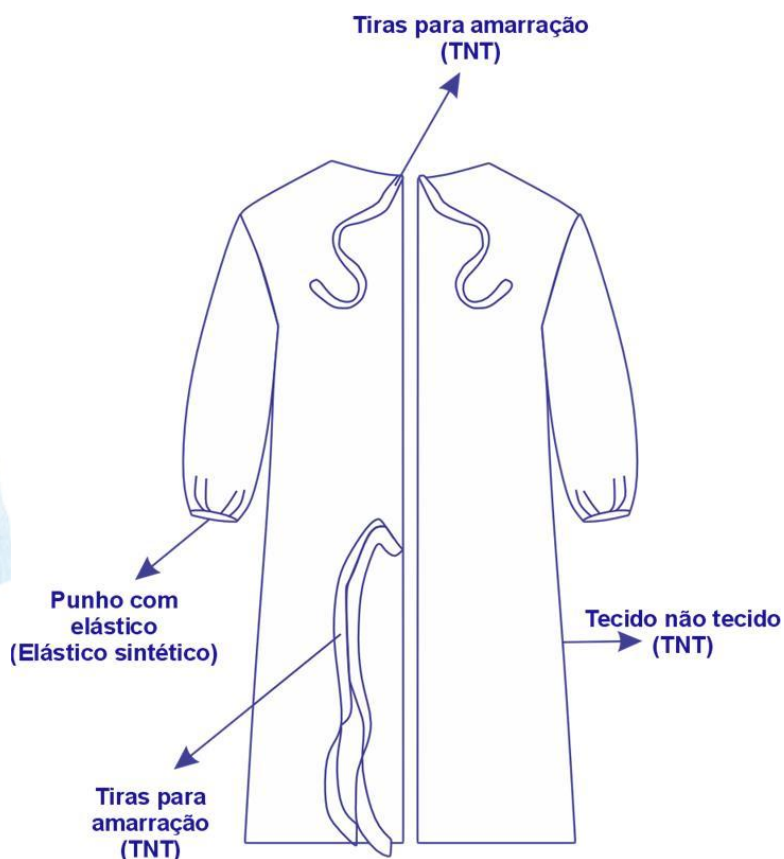

INDICAÇÃO, FINALIDADE, USO E APLICAÇÃO A QUE SE DESTINA O PRODUTO

Indicado para proteção do tronco e membros superiores do usuário contra respingos de produtos, sangue e fluídos corporais

EMBALAGEM:

Embalado em pacotes contendo 10 unidades, acondicionados em caixa de transporte disponível nas versões com 10, 20 ou 30 pacotes. Rotulagem conforme os requisitos da RDC 751/2022.

VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.

ORIENTAÇÕES PARA O USO E APLICAÇÃO CORRETA DO PRODUTO:

- Abrir o pacote com as mãos limpas e secas;
- Retirar o avental a ser utilizado de sua embalagem original;
- Amarrar as tiras externas do avental no pescoço e cintura;
- Não deve ser utilizado em atividades com grande quantidade de fluídos.;
- Após a utilização, descartar o produto em local apropriado, conforme as normas vigentes.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS E CUIDADOS ESPECIAIS:

- Produto destinado a uso médico hospitalar;
- Verifique a integridade da embalagem antes da sua utilização, não utilize se a mesma estiver violada, danificada ou molhada;
- Somente utilizar o produto se o mesmo estiver dentro do prazo de validade, desprezar o produto sempre que houver dúvida quanto à contaminação;
- Manipular com os cuidados necessários para evitar contaminação;
- Produto de uso único, não reesterilize nem reutilize, destrua após o uso;
- PROIBIDO REPROCESSAR;
- Descartar conforme legislação de resíduos de saúde (RDC 222/2018);
- Atóxico. Livre de Látex.

CONTRAINDICAÇÕES:

O avental descartável em TNT, não estéril, deve ser evitado em procedimentos cirúrgicos estéreis e situações de alto risco biológico. Pessoas alérgicas aos materiais do TNT devem evitar seu uso. Não indicado para proteção contra substâncias químicas agressivas, e não deve ser usado prolongadamente, devido à possível perda de eficácia como barreira protetora.

CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Armazenar em local fresco, seco e à temperatura ambiente, entre 5°C e 35°C para preservar a qualidade e integridade do produto antes do uso, evite calor e proteja o produto da luz do sol. O produto deve ser transportado em sua embalagem original.

SIMARA COLOMBI BUSCH
RESPONSÁVEL TÉCNICA - COREN/SC 273.13